

# 進化するスプリント!! 快適な装着感を実現しました。




## Nemoa™ Splint®



サイズバリエーションが豊富で用途にあわせてご利用いただけます。従来使用されていた石膏ギプスに比べ軽量で、強度、耐久性に優れています。

- 皮膚側に水をはじく厚手の疎水性不織布を使用しており、不快感を与えません。
- 外側(青色部分)には水を浸透保持する薄手の親水性不織布を採用しました。
- ロールタイプ(全5サイズ)、カットタイプ(全18サイズ)、とバリエーションが豊富です。用途に合わせてお使いいただけます。

### ▶ 作業性・装着感を飛躍的に向上させた新装着方式

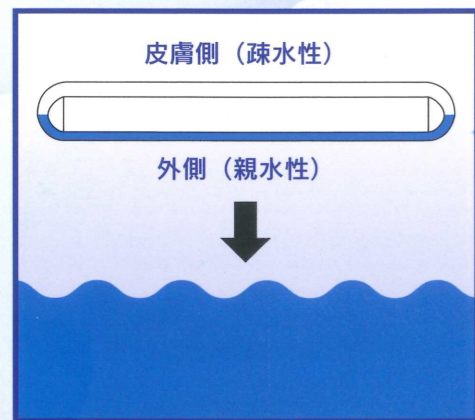

#### 皮膚側(疎水性)

皮膚に接触する側に水をはじく厚手の疎水性不織布を使用しました。装着の時の不快感が軽減されます。

#### 外側(親水性)

外側(青色部分)は水を浸透保持する薄手の親水性不織布を採用しました。素早く硬化剤に水を含みます。


### ▶ 撥水性・抗菌性フェルトパッドの採用

肌にあたる側のフェルトパッドは、疎水性に優れており不快な水濡れ感が軽減されました。また抗菌性にも優れており、臭いや肌のトラブルを軽減し、快適な付け心地です。

#### 素材の安全性(抗菌性) 刺激試験 (ISO 10993-10)

試験項目	試験方法	結果
疑似皮膚刺激試験	ISO 10993-10. 5.2	合格
皮膚感作性試験	ISO 10993-10. 6.2	合格

試験期間: 韓国生活環境試験研究院 試験実施日: 2004.1.28

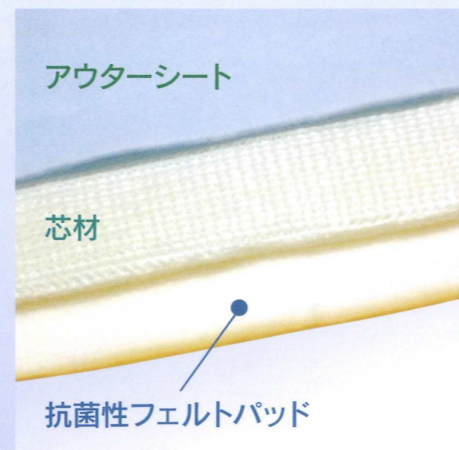


▲シート構造説明図

## III ネモア スプリント ロール・カット (グラスタイプ)

### ロールタイプ

ロールタイプですので、適当な長さにカットしてお使いいただけます。

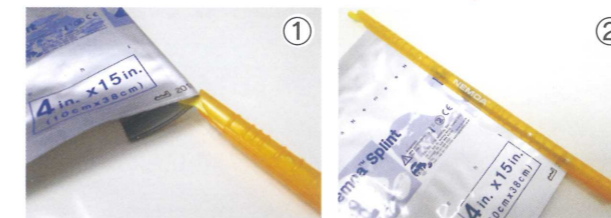


- ①アルミパウチを2つ折りにし、黄色い先端を内側に差し込む。
- ②最後まですべりこませ、保存する。

### カットタイプ


あらかじめ適切な大きさにカットされているタイプです。様々なバリエーションがありますので部位の形状に合わせてお使いいただけます。ファイバークラス製と不織布のラインナップがございます。

### 使用例

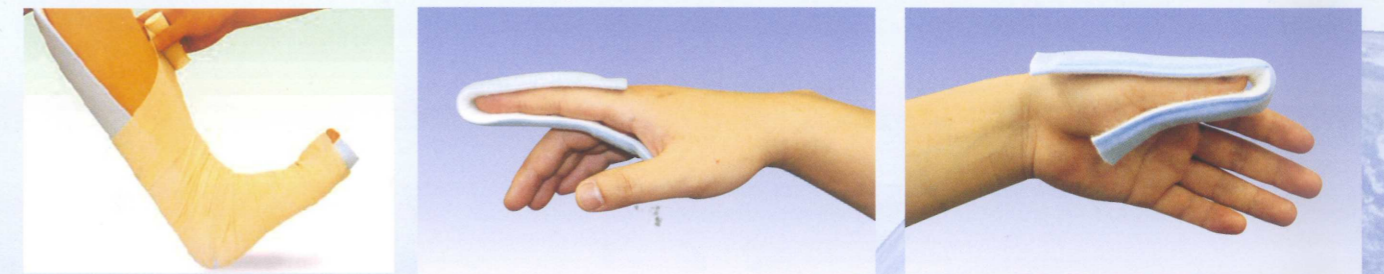

<ロール>

特殊なネモアクリップ(1ロールに1個)を採用しています。密閉性に優れ、保存時に発生する硬化を防ぎます。

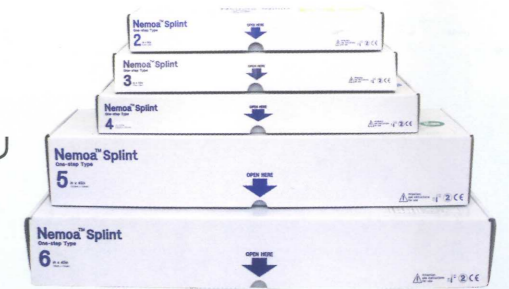


<カット>

## III ネモア スプリント ロール・カット (クロスタイプ)

芯材に不織布を使用したギプスシーネです。

X線透過性に優れており、ネモアスプリントを装着したままレントゲン撮影が可能です。

また、シーネ端部分に棘(とげ)が出ないため面倒な加工が不要です。

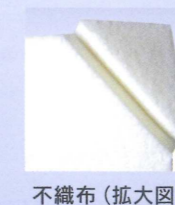

不織布(拡大図)



# Nemoa Splint Line Up

## ネモア スプリント ラインナップ

### III ネモア スプリント 製品仕様一覧

タイプ	サイズ		グラスタイプ		クロスタイプ		入数
	(inch)	(cm)	商品コード	JANコード	商品コード	JANコード	
ロール	2	5.0×450	NFR-2045	4580307863103	NNR-2045	4580307863004	1
	3	7.5×450	NFR-3045	4580307863127	NNR-3045	4580307863028	1
	4	10.0×450	NFR-4045	4580307863141	NNR-4045	4580307863042	1
	5	12.5×450	NFR-5045	4580307863165	NNR-5045	4580307863066	1
	6	15.0×450	NFR-6045	4580307863189	NNR-6045	4580307863080	1

届出番号：44B3X10001000008

カット	0.5	1.25× 20	NFF-0520	4580307863400			10
	1	2.5× 20	NFF-1020	4580307863424			10
	1	2.5× 30	NFF-1030	4580307863448			10
	1.5	3.75× 20	NFF-1520	4580307863462			10
	1.5	3.75× 30	NFF-1530	4580307863486			10
	2	5.0× 25	NFO-2010	4580307863509			5
	3	7.5× 20	NFO-3008	4580307863523			5
	3	7.5× 30	NFO-3012	4580307863547			5
	3	7.5× 50	NFO-3020	4580307863561			5
	3	7.5× 88	NFO-3035	4580307863585			5
	4	10.0× 20	NFO-4008	4580307863608			5
	4	10.0× 38	NFO-4015	4580307863622			5
	4	10.0× 50	NFO-4020	4580307863646			5
	4	10.0× 75	NFO-4030	4580307863660			5
	5	12.5× 75	NFO-5030	4580307863684			5
	5	12.5×114	NFO-5045	4580307863707			5
	6	15.0× 75	NFO-6030	4580307863721			5
	6	15.0×114	NFO-6045	4580307863745			5

届出番号：44B3X10001000005


### III ネモア シリーズ ラインナップ

ネモアスプリントロール(クロス・グラス)タイプ



部位・症例に合わせて必要な長さだけ使える経済的なタイプのスプリントです。

ネモアスプリントカット(クロス・グラス)タイプ

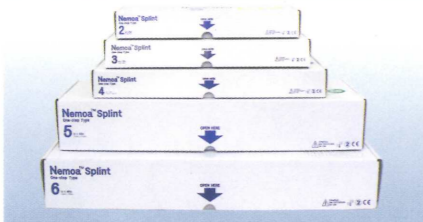

あらかじめ便利な長さにかットされ個別包装された、袋から取り出してそのまま使用出来るタイプのスプリントです。

ネモアキャスト(ポリ・グラス)タイプ



ポリエステルを用いた、ラジオーセントのギブス包帯です。切除時にガラスの粉塵を生じません。

# Nemoa™ Splint®

## ネモア スプリント

JHM 日本ヒューマンメディック株式会社

〒870-0848 大分県大分市賀来北2丁目16番34号  
TEL: 097-549-4140 FAX: 097-549-7470

詳しい製品情報は下記ホームページにも掲載しております。  
<http://www.hyuman.co.jp>